

近赤外線 LED Anti-Ager

BB MASK

1日17分、17日後に出会う
17年前の肌の奇蹟！



Just! 17 Minutes!

一日一回 17分、私のお肌のためのヒーリングタイム~

LED 近赤外線波長を利用したアンチエイジング・ソリューション-
BB Maskがあなたの顔に奇蹟のような変化を起こします!



額、目もと等のしわ改善

しみ, そばかすの緩和

口元の八の字しわ改善

BB Miracle 1

皮膚のしわ改善、
細胞再生!

BB Miracle 2

ピンと張って透明な
お肌に改善!

BB Miracle 3

家庭でできる
専門スキンケア!

どうして BB Maskなのでしょう?

- ✔ カいっぱい擦らなくても OK? そのまま使ってください~
- ✔ 目、額、八の字しわ、別々に? みんな一回で終わらせてください~
- ✔ 毎日長い時間投資するのが大変? 1日17分だけゆっくり休んでください~
- ✔ きれいに管理することも仕事だ? 汚染も洗浄も必要ないです~


科学が作った皮膚再生の奇蹟！

「LED近赤外線」をご存じですか？

生命の光

赤外線は病院でリハビリ治療に広く使われるほどに細胞活性化や食菌作用、老廃物除去に卓越した効果を持ち、〈生命の光〉、〈神秘の光〉と呼ばれてきましたが、強い光と熱によって皮膚や眼球に有害なため、顔には使うことができませんでした。

しかし BB Mask が使う LED 近赤外線は熱がなくて肌細胞を損傷させないながらも光の波長を真皮層まで浸透させ、一般細胞だけでなくコラーゲン損傷を回復・再生させます。また皮膚の損傷を誘発する酵素を非活性化させ、にきび除去やしわ改善に役立ち、肌を透明で美しくします。

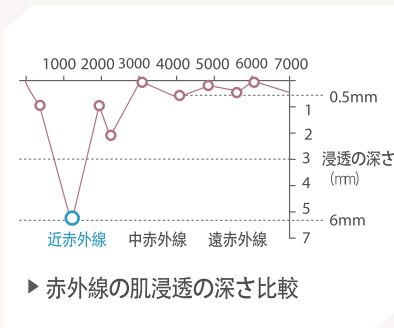

善良な光

近赤外線はレーザーのように皮膚細胞を刺激したり傷つけたりして回復する過程で肌がよくなるようにする侵襲的な手術原理ではなく、暖かい震動が細胞を目覚めさせて血流を活性化させ、お肌を元気にする善良な光です。



NASA宇宙航海士たちが先に体験した LED近赤外線の再生効果

LED近赤外線を利用したスキンケアはアメリカ・NASAで先に始まりました。NASAはLED近赤外線がやけどや衝突事故による負傷、骨折、筋肉や骨の退化、外傷による虚血損傷、強い太陽光による肌損傷などにおいて回復や再生の効果があり、宇宙航海士だけでなく軍人や一般人にも大きく役立つと発表しました。

効果 1

- * 温熱・発熱
- * 細胞再生
- * 痛みの緩和
- * 老廃物の排出
- * 消毒・殺菌

効果 2

- * 血液循環
- * メラニン排出

効果 3

- * 老化防止
- * 肌リフティング
- * しわ改善
(目/目袋/八字)
- * 美白・しみ除去
- *トラブル改善

専門機関の効果検証で信じていることができる

BB Mask 部位別の臨床結果

BB Maskは臨床実験を通じてその卓越した皮膚の回復や再生効果を立証することができました。
その奇蹟のようなお肌の変化、目で直接お確かめください

「これからは思う存分笑うことができる！」

BB Maskの臨床実験〈しわ改善〉実際事例

目もとのしわ改善 ▼



Before



After



Before



After

口元の八の字しわ改善 ▼



Before



After



Before



After

▶ 目もとの細かいしわの変化

皮膚接写撮影



(使用前)



(6週後)


皮膚の表面



(使用前)



(6週後)

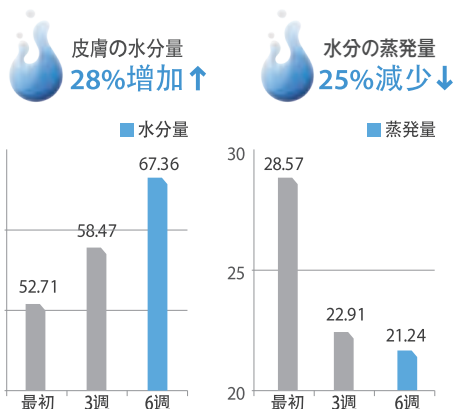

「息苦しい厚化粧はもうストップ!」 BB Maskの臨床実験 〈肌のトーン改善〉 実際事例


メラニンの緩和 ▼



Before



After

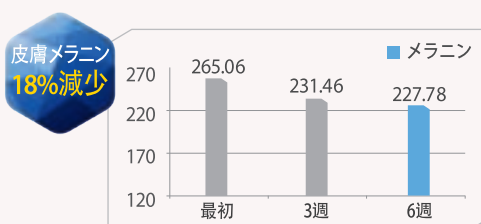


紅班の緩和 ▼



Before



After

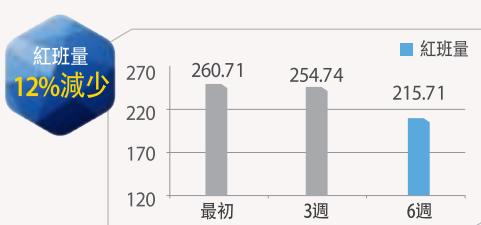

BB Mask 臨床実験の進行概要

臨床条件			
対象	期間	着用	使用
年齢別16人	6週	週5日/17分/1日1回	緑茶アンブル(食用)

臨床手続き	
実験期間	2012年8月16日~2012年10月31日まで、1週間に5回・6週間
実験方法	- 被実験者に毎日洗顔後スキンを塗布し、緑茶アンブルを塗った後、BB Maskを17分間照射 - 緑茶アンブルは食用可能な緑茶エキスで、最小限肌を整えるために使用 - 皮膚の測定は臨床実験の2週次、4週次、6週次に渡って非侵襲的な方法を使用 - BB Mask照射と皮膚測定、そして撮影とデータ分析は研究責任者と研究員が直接実施
実験対象	顔面皮膚の油分、水分、メラニン、紅班量、TEWL、しわの状態を測定
実験環境	測定条件は身体代謝が比較的に安定的な恒温(22±2℃)、恒湿(45±5%)状態をキープ

いつでもどこでも簡単に便利にケアする!

BB Maskの使い方

1日17分着用するだけで、たった1週間ですべすべなお肌のキメを、
1ヶ月でぴんと張る弾力を、2ヶ月でしわの改善効果を確認することができます。

BB Maskの5段階使用手順



BB Maskの着用方法



▶ BB Maskの製品規格 • サイズ: 300*200*150mm • 電源: 交流220V, 50-60Hz • 出力: DC15V/4A

BB Maskの週別使用方法・改善効果

使用期間	使用方法	改善効果
1~4週次	• 毎日朝夕に使用(それ以上は効果なし) • 毎日のご使用をお薦め(最少週5回以上) • すっきり洗顔が重要 • 本人に合う化粧品の使用は必須	1週次: 洗顔時に柔らかくてすべすべした肌を感じることができる。
		2~4週次: 化粧が浮かず、ノリがいい。
5~7週次	• 最少1日1回使用(夕方のご使用は必須) • 毎日のご使用をお薦め(最少週5回以上) • 改善したい機能性化粧品を使用	自分でも肌のトーンが明るくなり、ピンと張るのを感じて、周りから肌がきれいになったと褒められるように
8週次~	• 1日1回使用(夕方のご使用をお薦め) • 毎日のご使用をお薦め(最少週4回以上) • ずっと使い続けられる化粧品を使用	お肌のトーンが明るくなりしわが改善したことが感じられ、写真でもその効果が確認できる

| 自他共に認める技術力とデザイン! BB Maskの特許証書 |



〈製品技術特許〉



〈デザイン特許〉



〈商標特許〉

お問い合わせ

TEL. 03-5959-5287 | FAX. 03-5959-5291
E-mail. info@it-japan.ne.jp | URL. <http://www.it-japan.jp>



アイテージャパン株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島1-12-6 高関ビル2B